

TORAY

FILTRYZER™

BG Series

Hollow Fiber Dialyzer
Dialyseur à fibres creuses
Dializzatore a fibre cave
Kapillardialysator
Dializador de Fibra Hueca
Φίλτρο αιμοκάθαρσης κοίλων ινών
Holle vezel dialysator

Instructions for Use of FILTRYZER

Instructions d'utilisation du FILTRYZER

Istruzioni per l'impiego del FILTRYZER

Gebrauchsanweisung für FILTRYZER Dialysatoren

Instrucciones para el Uso de FILTRYZER

Οδηγίες χρήσης του FILTRYZER

Gebruiksaanwijzing voor FILTRYZER

Instructions for Use of FILTRYZER BG Series

Read these instructions carefully before using the "FILTRYZER" BG series dialyzer.

I. INTENDED PURPOSE

"FILTRYZER" dialyzers are artificial kidney (hollow fiber dialyzer) which removes uremic toxins and water from the blood through hemodialysis to ameliorate conditions of a patient with renal insufficiency.

II. INDICATIONS

"FILTRYZER" dialyzers are indicated for SINGLE USE in acute or chronic hemodialysis. These dialyzers should be used only on the direction of a physician and used by trained medical personnel or by trained patient/caregiver authorized by a physician.

III. CONTRAINDICATIONS

Special contraindications for this dialyzer are unknown. Generally, the contraindications for hemodialysis are applicable.

IV. STERILIZATION

"FILTRYZER" dialyzers are gamma-ray sterilized and nonpyrogenic (Blood side).

V. PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS

Refer to the attached technical data.

VI. ADVERSE EVENTS

- 1) Patients should be carefully monitored during and after dialysis. In particular, patients with a history of allergy and hypersensitivity, patients who have experienced blood pressure decreasing by hemodialysis, patients whose immune function is accelerating, and patients using "FILTRYZER" for the first time should be carefully monitored. Appropriate treatments, including discontinuation of dialysis, should be taken, if the symptoms or signs of adverse reactions are observed.
- 2) Disequilibrium syndrome may appear especially during the introductory period of dialysis treatment, when applying to patients with low body weight, elderly patients, or patients in need of rapid water removal in a short period of time, or when changing dialyzer to one which is more efficient or has a larger effective surface area. Appropriate treatments, including discontinuation of dialysis, should be taken if the following symptoms or signs of disequilibrium syndrome are observed: headache, nausea, vomiting, consciousness disturbed, blood pressure decreased or convulsion.
- 3) Loss of proteins such as albumin may increase depending on the treatment conditions. Observe the patient's condition and serum albumin values.
- 4) Appropriate treatments, including discontinuation of dialysis, should be taken, if the following symptoms, which may occur occasionally in usual dialysis, are observed: dyspnea, chest pain, blood pressure decreased, blood pressure increased, loss of consciousness, hypoxemia, shock, palpitation, tachycardia, allergy, hypersensitivity, anaphylactoid reactions, white blood cell decreased, platelet decreased, eosinophilia, pruritus, edema (eyelid, throat, intraoral, face, etc.), malaise, fatiguability, headache, vertigo, back pain, abdominal pain, lumbar pain, diarrhea, queasy, vomiting, chest discomfort, discomfort, eczema, rash, redness, urticaria, flushed face, pyrexia, rigors, abnormal sweating, muscle cramp, cough, hoarseness, tinnitus, yawning, abnormal vision, taste peculiar, strange smell sensation or hemolysis.
- 5) Improper handling or storage during transportation or operation (mechanical shock, excessively high or freezing temperature, etc.) may increase the risk of blood leakage. When blood leakage is found, hemodialysis should be discontinued and appropriate actions should be taken. The attending physician should decide whether or not to return the blood in the extracorporeal circuit to the patient.
- 6) Other complications may occur caused by malfunction, a defect of dialysis machine or a procedural error in its use, such as blood loss, blood overheating, hemolysis, excessive ultrafiltration and electrolyte imbalance. Refer to the instructions for the machine to avoid such complications.
- 7) In case of a serious incident related to this dialyzer, it should be reported to the manufacturer and the competent authority in which the user and/or patient is established.

VII. WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. General warnings and precautions

Consult the physician if any abnormalities are found during and/or after the use of the dialyzer.

1) Reuse

"FILTRYZER" is a medical device intended for SINGLE USE ONLY. Its reuse might cause product damages (blood leakage, performance

changes, etc.) and also induce patient injury (infection caused by microbiological contamination, adverse reactions caused by residual reprocessing agents and/or blood components, etc.).

- 2) Special care
Special care is recommended for elderly, pregnant or pediatric patients.
- 3) Rinse
"FILTRYZER" dialyzers are filled with sterile water. Before starting dialysis, the blood side of the dialyzers must be flushed with sterile physiological saline or dialysate, and the dialysate side must be flushed with dialysate to avoid hemolysis.
- 4) Dialysis machine
Since "FILTRYZER" dialyzers have a high ultrafiltration rate, they should be used in conjunction with dialysis machines equipped with an ultrafiltration rate controller.
- 5) Storage
"FILTRYZER" should be stored and transported at temperatures between 5°C (41°F) and 30°C (86°F). Exposure to severe environmental conditions (direct sunlight, excessive humidity, wetness, dryness, freezing temperature) should be avoided.
- 6) Handling
"FILTRYZER" is made from various plastic components. Excessive vibration or mechanical shock should be avoided during handling and operation. Avoid tapping the dialyzer header with a clamp or other metal object to remove air bubbles or to return the blood.
- 7) Chemicals
Strictly avoid contact between the device and alcohol (sterilant) or other organic solvents. Such contact may lead to distortions or cracks of the device.
- 8) Dialysate quality control
Follow the standards of each country. Use clean dialysate since dialysate may come into patient blood stream through the mechanisms of backfiltration and/or backdiffusion.

2. Precautions to be taken before dialysis

- 1) The dialyzer must not be used if it appears to be damaged or its package is torn.
- 2) The dialyzer must not be used if there appears to be a water leak such as, drops of water in the package, improper cap fitting over either blood or dialysate port or an accumulation of a large quantity of air in the blood or dialysate compartment.
- 3) Connect the Luer lock connectors of the blood line to the blood ports by inserting at a correct angle and twisting to ensure a tight fitting to avoid detachment of connection, saline or blood leakage, or breakage of the blood ports.
- 4) The dialyzer should be used just after opening the package, rinsing and priming.
- 5) Take special care not to allow air bubbles to remain in or enter the blood compartment during the rinsing and priming procedure.

3. Precautions during dialysis

- 1) Confirm that there is no fluid leakage at the blood connection and the dialysate connection sites.
- 2) Transmembrane pressure (TMP) must not exceed 66 kPa (500 mmHg). TMP higher than 66 kPa (500 mmHg) could cause blood leakage or disconnection of the blood lines from the dialyzer connectors.
- 3) The performance of the dialyzer could be diminished if the device is used below the recommended flow rate or in orientations other than indicated.
- 4) The administration method and dose of an anticoagulant such as heparin should be determined for each patient by a physician. Special cares, including monitoring of coagulation time during dialysis, should be taken for patients who have a tendency to hemorrhage or who have a coagulation disorder.
- 5) If air bubbles, a blood leak, clotting or hemolysis are observed during dialysis, appropriate treatments, including discontinuation of dialysis or replacing the dialyzer, should be taken promptly.
- 6) When the administration of drugs is intended before or during dialysis, consider various conditions such as route, timing and dose, because dialysis may remove them or modify their effects. Special cares are recommended for patients receiving angiotensin-converting-enzyme inhibitors.
- 7) When completing dialysis, air rinsing of remaining blood should not be employed. Return the patient's blood by rinsing with saline, returning as much of the patient's blood as possible by holding the dialyzer vertically and rotating it around its axis, if necessary.

VIII. DIALYSIS PROCEDURE

Use protective gloves and an aseptic technique to prevent contamination of patient's blood when

connecting the blood line to the dialyzer, collecting blood samples, or returning the blood from the extracorporeal circuit. The extracorporeal circuit with the connectors conforming to ISO8638 or ISO8637-2 is recommended for this dialyzer.

The following procedure is an example.

1. Preparation for Dialysis

- 1) Take the dialyzer out of the package and place it on the dialyzer holder.
- 2) Hang a container of sterile physiological saline (1000 mL or more) on an IV pole, and connect the arterial infusion line to the container.
- 3) Fill the arterial blood line with physiological saline, first the vascular access connector side and then the dialyzer connector side. Clamp both ends of the arterial line. (Fig. 1)
- 4) Connect the venous line to the venous port of the dialyzer. (Fig. 2)
- 5) Carefully connect the arterial line filled with physiological saline to the arterial port taking care so as not to allow air to enter the dialyzer. If some air bubbles are observed in the arterial port, remove them by squeezing the venous drip chamber. (Fig. 3)
- 6) Rinse the blood side of the dialyzer and the blood line with more than 1000 mL of physiological saline at about 100 mL/min. (Fig. 4)
- 7) Connect the dialysate lines to the dialysate ports so that the dialysate flows countercurrently to the blood flow. Remove any air bubbles and rinse the dialysate side with dialysate flowing at about 500 mL/min. (Fig. 5) Let the dialysate flow for at least 5 minutes. Avoid any ultrafiltration during this procedure.
- 8) Prime the dialyzer and blood lines with more than 500 mL of heparinized physiological saline, and confirm that there are no air bubbles remaining in the dialyzer by flushing repeatedly. If massive air bubbles appear from fibers, replace the dialyzer. (Fig. 6)
- 9) Confirm that the venous bubble trap is about 3/4 full.
- 10) Clamp the venous line near the distal end.

2. Dialysis

- 1) Flow dialysate after setting filtration rate at 0 mL/h if dialysate hasn't flowed.
- 2) Connect the arterial line to the patient's arterial cannula.
- 3) Open the clamps of both the arterial and venous lines and start the blood pump at 50-100 mL/min. When blood reaches the end of the venous line, stop the blood pump and connect the venous line to the venous cannula.
- 4) Gradually increase the blood flow rate and the ultrafiltration rate to the levels required for each patient.
- 5) As for the confirmation of dialysis machine's alarm function prior to dialysis treatment, follow the machine manufacturer's instructions.

3. Completion of Dialysis

- 1) Reduce pressures in both the blood and dialysate sides as much as possible and stop the blood pump after 5 minutes of perfusion without ultrafiltration.
- 2) Connect a container containing 300 mL or more of physiological saline to the infusion line.
- 3) Using gravity, let physiological saline flow into the arterial blood access side to return in-line blood. Clamp the end of the line and aseptically withdraw the arterial cannula.
- 4) Remove the arterial blood line from the blood pump.
- 5) Using gravity and physiological saline, start blood return from the dialyzer and the blood lines.
- 6) Clamp the end of the line and aseptically withdraw the venous cannula.
- 7) Discard the dialyzer, the lines and other disposables in the manner approved by your institution.

IX. WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY

- 1) "FILTRYZER" is manufactured in accordance with its specifications and in compliance with the GMP regulatory guidelines. Toray will replace a dialyzer with manufacturing defects free of charge. When necessary, Toray will request return of the dialyzer itself and all related packaging in order to investigate the cause and to take corrective action, if applicable.
- 2) Toray is not responsible for any damages, irrespective of product damages, patient injury or any other problems caused by misuse, improper handling, operation and storage by the customer.
- 3) Toray is not responsible for any product damages, patient injury or any other problems caused by reuse of the dialyzer.

X. OTHER INFORMATION

The following information is available on request.

- 1) Details of the test methods
- 2) *In vivo* performance characteristics

Mode d'emploi du FILTRYZER série BG

Lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser le dialyseur « FILTRYZER » série BG.

I. DESTINATION

Les dialyseurs « FILTRYZER » sont des reins artificiels (dialyseurs à fibres creuses) qui éliminent les toxines urémiques et l'eau du sang par hémodialyse afin d'améliorer l'état de santé des patients insuffisants rénaux.

II. INDICATIONS

Les dialyseurs « FILTRYZER » sont à USAGE UNIQUE et sont destinés aux traitements de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Ces dialyseurs doivent toujours être utilisés sous la responsabilité d'un médecin et par un personnel médical formé ou par un patient/aidant formé et autorisé par un médecin.

III. CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication spécifique pour l'utilisation de ce type de dialyseur n'est connue à ce jour. En général, les contre-indications de la dialyse demeurent applicables.

IV. STÉRILISATION

Les dialyseurs « FILTRYZER » sont stérilisés par rayons gamma. Ils sont stériles et apyrogènes et sont remplis d'eau pour préparations injectables (côté de sang).

V. PERFORMANCES ET SPÉCIFICATIONS

Se référer à la fiche technique jointe.

VI. EFFETS INDÉSIRABLES

- 1) Les patients doivent être surveillés attentivement pendant et après la dialyse. En particulier, les patients ayant des antécédents d'allergie ou d'hypersensibilité, les patients ayant connu des chutes de tension artérielle en hémodialyse, les patients dont la fonction immunitaire est accrue et les patients utilisant le « FILTRYZER » pour la première fois doivent faire l'objet d'une surveillance attentive. Un traitement adéquat doit être administré et la dialyse interrompue si des symptômes ou des signes d'effets indésirables se produisent.
- 2) Un syndrome de déséquilibre peut apparaître, surtout lors de la période d'introduction de la dialyse chez des patients à faible poids, des patients âgés ou des patients devant perdre de l'eau rapidement sur une courte durée, ou après un changement de dialyseur, plus performant ou de plus grande surface efficace. Un traitement adéquat doit être administré et la dialyse interrompue si les symptômes suivants ou des signes du syndrome de déséquilibre sont observés : céphalées, nausées, vomissements, troubles de la conscience, hypotension ou convulsions.
- 3) La perte de protéines telles que l'albumine peut augmenter en fonction des conditions de traitement. Observer l'état du patient et les valeurs d'albumine sérique.
- 4) Un traitement adéquat doit être administré et la dialyse interrompue si les symptômes suivants, qui peuvent parfois compliquer une dialyse normale, sont observés : dyspnée, douleurs thoraciques, hypotension, hypertension, perte de la conscience, hypoxémie, état de choc, palpitations, tachycardie, allergie, hypersensibilité, réactions anaphylactoides, leucopénie, thrombopénie, éosinophilie, prurit, œdème (paupière, gorge, intrabuccal, face, etc.), malaise, fatigabilité, céphalées, vertiges, douleurs du dos, abdominales ou lombaires, diarrhée, nausées, vomissements, gêne dans la poitrine ou autre, eczéma, éruption cutanée, inflammations, urticaire, visage rouge, pyrexie, frissons, transpiration anormale, spasmes musculaires, toux, enrouement, acouphène, bâillement, troubles de la vue, trouble de l'olfaction, dysgueusie, hémolyse.
- 5) Une mauvaise manipulation ou des mauvaises conditions de stockage pendant le transport (chocs mécaniques, températures trop élevées ou négatives, etc.) peuvent accroître le risque d'une fuite de sang. En cas de fuite de sang, interrompre la dialyse et prendre les mesures qui s'imposent. Le médecin traitant décidera s'il convient ou non de restituer au patient le sang contenu dans le circuit extracorporel.
- 6) D'autres complications peuvent se produire à la suite d'un mauvais fonctionnement du générateur de dialyse ou d'une erreur de commande : perte de sang, surchauffe du sang, hémolyse, ultrafiltration excessive et déséquilibre électrolytique. Pour éviter ces complications, consulter la notice d'utilisation du générateur.
- 7) En cas d'incident grave lié à ce dialyseur, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente dont relève l'utilisateur et/ou le patient.

VII. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

1. Avertissements et précautions généraux

Consulter le médecin en cas d'anomalie pendant et/ou après l'utilisation du dialyseur.

Réutilisation

Le dialyseur « FILTRYZER » est un dispositif médical conçu pour un USAGE UNIQUE. Sa réutilisation pourrait endommager le produit (fuite de sang, altération des performances, etc.) ou entraîner des complications pour le patient (infection provoquée par contamination microbienne et effets indésirables

causés par des résidus de solution de nettoyage et/ou par les constituants du sang, etc.).

Précautions particulières

Il est recommandé de prendre des précautions particulières concernant les patients âgés, ou en bas-âge ainsi que les femmes enceintes.

Rinçage

Les dialyseurs « FILTRYZER » sont remplis d'eau pour préparations injectables. Avant de commencer une dialyse, le côté sang des dialyseurs doit être rincé avec une solution isotonique de chlorure de sodium ou du dialysat, et le côté dialysat avec du dialysat afin d'éviter tout risque d'hémolyse.

Générateur de dialyse

Les dialyseurs « FILTRYZER » ont un taux d'ultrafiltration élevé et doivent donc être utilisés avec des générateurs de dialyse équipés d'un maîtreur d'ultrafiltration.

Stockage

Les dialyseurs « FILTRYZER » doivent être conservés et transportés entre 5°C et 30°C. Il faut éviter toute exposition à la lumière solaire directe, à une humidité ou sécheresse excessive, à des températures négatives ou à des solvants.

Manipulations

Les dialyseurs « FILTRYZER » sont composés de différentes pièces en matière plastique. Éviter les vibrations excessives et les chocs physiques pendant leur manipulation et leur utilisation. Ne pas tapoter la tête du dialyseur avec un clamp ou un autre objet métallique pour éliminer les bulles d'air ou restituer le sang.

Agents chimiques

Éviter rigoureusement tout contact entre le dispositif et l'alcool (agent stérilisateur) ou tout autre solvant organique. Ce contact peut entraîner des déformations ou des fissures du dispositif.

Contrôle de qualité du dialysat

Respecter la réglementation de chaque pays. La contamination du dialysat peut provoquer des réactions graves chez le patient par le biais des mécanismes de rétrofiltration et/ou de rétrodiffusion.

2. Précautions à prendre avant la dialyse

- 1) Ne pas utiliser le dialyseur s'il semble endommagé ou si son emballage est déchiré.
- 2) Ne pas utiliser le dialyseur s'il semble y avoir une fuite d'eau : présence de gouttes d'eau dans l'emballage, mauvais ajustement du capuchon sur le côté sang ou dialysat, accumulation d'une quantité importante d'air dans le compartiment sang ou dialysat.
- 3) Raccorder les connecteurs Luer-Lock de la ligne à sang au dialyseur côté sang en les insérant selon un angle correct et en les tournant pour les ajuster solidement afin d'empêcher le détachement du raccord, une fuite de soluté isotonique de chlorure de sodium ou de sang, ou une cassure du côté sang.
- 4) Utiliser le dialyseur immédiatement après avoir ouvert l'emballage et après avoir procédé au rinçage et à l'amorçage.
- 5) Prendre toutes les précautions pour éviter que des bulles d'air n'entrent ou ne restent dans le dialyseur pendant ces 2 phases.

3. Précautions à prendre pendant la dialyse

- 1) Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites de liquide au niveau des raccords des circuits sang et dialysat.
- 2) La pression transmembranaire (PTM) ne doit pas dépasser 66 kPa (500 mmHg), au risque de provoquer une fuite de sang ou la déconnexion des lignes à sang du dialyseur.
- 3) Les performances du dialyseur pourraient être réduites si le dispositif est utilisé en dessous du débit recommandé ou dans des positions autres que celles indiquées.
- 4) L'administration d'anticoagulant (héparine par exemple) et le dosage de l'anticoagulant doivent être prescrits par un médecin pour chaque patient. Des précautions particulières doivent être prises pour les patients ayant une tendance aux hémorragies ou des troubles de coagulation. Les temps de coagulation doivent être contrôlés pendant la dialyse.
- 5) Si des bulles d'air, une fuite de sang, une coagulation ou une hémolyse, sont observées pendant la dialyse, il faudra administrer rapidement le traitement adéquat voire interrompre la dialyse ou remplacer le dialyseur.
- 6) Si des médicaments doivent être administrés avant ou pendant la dialyse, il convient de tenir compte des différents paramètres tels que la voie d'administration, le moment de la prise, la dose, car la dialyse peut modifier les effets de ces médicaments. Des précautions particulières sont recommandées pour les patients traités par inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine.
- 7) Une fois la dialyse terminée, éviter de restituer à l'air. Restituer le sang au patient en rinçant le circuit avec une solution isotonique et en restituer le plus possible en tenant le dialyseur à la verticale et en le retournant si nécessaire.

VIII. PROCÉDURE DE DIALYSE

Afin d'éviter toute contamination avec le sang du patient, utiliser des gants de protection ainsi que des techniques aseptiques pour raccorder les lignes à sang au dialyseur, recueillir les échantillons de sang et

restituer le sang du circuit extracorporel. L'utilisation du circuit extracorporel avec les raccords conformes à la norme ISO 8638 ou ISO 8637-2 est recommandée pour ce dialyseur.

La procédure suivante est un exemple.

1. Préparation de la dialyse

- 1) Sortir le dialyseur de son emballage et le placer dans le support de dialyseur.
- 2) Suspendre une poche de chlorure de sodium isotonique stérile (1000 mL ou plus) à une potence à perfusion et connecter la ligne d'infusion à la ligne artérielle.
- 3) Remplir la ligne à sang artérielle de chlorure de sodium isotonique côté aiguille artérielle, puis rincer la ligne côté dialyseur. Clamper les deux extrémités de la ligne artérielle (Fig. 1).
- 4) Connecter la ligne à sang veineuse du dialyseur (Fig. 2).
- 5) Raccorder avec précaution la ligne artérielle remplie de soluté isotonique de chlorure de sodium au côté artériel du dialyseur, en évitant toute entrée d'air dans le dialyseur. En cas de présence de bulles d'air, enlever le clamp sur la ligne veineuse tout en appuyant sur le piège à bulles veineux (Fig. 3).
- 6) Rincer le dialyseur côté sang et la ligne à sang artérielle avec plus de 1000 mL de chlorure de sodium isotonique avec un débit de 100 mL/min environ (Fig. 4).
- 7) Connecter les lignes de dialysat au dialyseur de telle sorte que le dialysat circule à contre-courant du flux sanguin. Chasser les bulles d'air et purger le circuit dialysat avec un débit d'environ 500 mL/min (Fig. 5). Poursuivre pendant au moins 5 minutes, avec une UF à 0.
- 8) Rincer le dialyseur et les lignes à sang avec plus de 500 mL de chlorure de sodium isotonique hépariné et vérifier qu'il ne reste pas de bulles d'air dans le dialyseur en clampant et déclampant la ligne artérielle. Si de nombreuses bulles apparaissent en provenance de fibres, remplacer le dialyseur (Fig. 6).
- 9) Vérifier que le piège à bulles veineux soit plein aux trois quarts.
- 10) Clamper la ligne veineuse près de son extrémité distale.

2. Dialyse

- 1) Lancer la circulation du dialysat avec un taux d'UF à 0 mL/h si le dialysat n'a pas encore été lancé.
 - 2) Raccorder la ligne artérielle à l'aiguille artérielle du patient.
 - 3) Déclamper les lignes artérielle et veineuse et démarrer la pompe à sang à 50-100 mL/min. Lorsque le sang arrive au bout de la ligne veineuse, arrêter la pompe et raccorder la ligne veineuse à l'aiguille veineuse du patient.
 - 4) Augmenter progressivement le de la pompe à sang et l'ultrafiltration jusqu'au niveau requis pour le patient.
 - 5) Pour vérifier les fonctions d'alarmes de la machine avant la séance de dialyse, suivre les instructions du fabricant de la machine.
- ### 3. Arrêt de la dialyse
- 1) Réduire autant que possible la pression du côté sang et du côté dialysat puis arrêter la pompe à sang après 5 minutes de perfusion sans ultrafiltration.
 - 2) Raccorder un flacon de 300 mL ou plus de chlorure de sodium isotonique à la ligne de perfusion.
 - 3) Laisser le chlorure de sodium isotonique s'écouler par gravité dans l'accès vasculaire artériel pour restituer le sang qui se trouve dans la ligne. Clamper l'extrémité de la ligne et retirer la canule artérielle dans des conditions aseptiques.
 - 4) Détacher la ligne à sang artérielle de la pompe à sang.
 - 5) Commencer la restitution du sang depuis le dialyseur et les lignes à sang, par gravité et en utilisant du chlorure de sodium isotonique.
 - 6) Clamper l'extrémité de la ligne et retirer la canule veineuse dans des conditions aseptiques.
 - 7) Jeter le dialyseur, les lignes et autres consommables selon les règles de votre établissement.

IX. GARANTIE ET LIMITE DE RESPONSABILITÉ

- 1) Le dialyseur « FILTRYZER » est fabriqué selon ses spécifications et conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication. TORAY s'engage à remplacer gratuitement un dialyseur présentant des défauts de fabrication. Au besoin, TORAY demandera le retour du dialyseur et de son emballage complet afin d'étudier la cause du défaut et de prendre éventuellement des mesures correctives.
- 2) TORAY décline toute responsabilité pour tous les dommages, qu'il s'agisse de dommages au produit, de dommages corporels pour le patient ou d'autres problèmes, résultant d'une utilisation ou d'un stockage incorrects de la part de l'utilisateur.
- 3) TORAY décline toute responsabilité pour tous les dommages matériels, dommages corporels au patient ou autres problèmes résultant de la réutilisation du dialyseur.

X. AUTRES INFORMATIONS

Les informations suivantes peuvent être communiquées sur demande :

- 1) Détails des méthodes de test
- 2) Données de performances *in vivo*

Istruzioni per l'uso FILTRYZER Serie BG

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il dializzatore "FILTRYZER" della serie BG.

I. UTILIZZO PREVISTO

I dializzatori "FILTRYZER" sono reni artificiali (dializzatore a fibra cava) in grado di rimuovere dal sangue le tossine uremiche e l'acqua plasmatica tramite emodialisi, migliorando così le condizioni dei pazienti affetti da insufficienza renale.

II. INDICAZIONI

I dializzatori "FILTRYZER" sono dispositivi indicati per impiego MONOUSO nell'emodialisi acuta o cronica e devono essere utilizzati solo sotto la guida di un medico. Questi dializzatori devono essere utilizzati solo su indicazione del medico e da personale sanitario appositamente formato o da pazienti/operatori sanitari addestrati e autorizzati da un medico.

III. CONTROINDICAZIONI

Non sono note controindicazioni particolari per questo dializzatore. In generale sono applicabili le controindicazioni relative all'emodialisi.

IV. STERILIZZAZIONE

I dializzatori "FILTRYZER" sono sterilizzati ai raggi gamma e apirogeni (Lato del sangue).

V. PRESTAZIONI E SPECIFICHE

Consultare i dati tecnici allegati.

VI. REAZIONI AVVERSE

- 1) I pazienti devono essere attentamente monitorati durante e dopo la dialisi. In particolare, ai primi trattamenti con "FILTRYZER", devono essere monitorati attentamente i pazienti con storia clinica di allergia ed ipersensibilità, i pazienti che hanno mostrato ipotensione dialisi-correlata, e i pazienti con un'aumentata attività immunitaria. Adottare misure adeguate, tra cui l'interruzione della dialisi, se si presentano sintomi o segni di reazioni avverse.
- 2) La sindrome da squilibrio può apparire specialmente durante la fase iniziale del trattamento dialitico nei pazienti con basso peso corporeo, anziani, pazienti che necessitano di rapida rimozione di liquidi, o quando si cambia dializzatore con uno più efficiente o con una superficie effettiva maggiore. Adottare misure adeguate, tra cui l'interruzione della dialisi, se si presentano i seguenti sintomi o segni della sindrome da squilibrio: mal di testa, nausea, vomito, perdita di conoscenza, diminuzione della pressione ematica o convulsioni.
- 3) La perdita di proteine quali l'albumina può aumentare a seconda delle condizioni di trattamento. Osservare le condizioni del paziente e i valori di albumina sierica.
- 4) Adottare trattamenti adeguati, tra cui l'interruzione della dialisi, se si presentano i seguenti sintomi, che possono verificarsi occasionalmente nella dialisi normale: dispnea, dolore al torace, aumento o diminuzione della pressione ematica, perdita di conoscenza, ipossemia, shock, palpitazioni, tachicardia, allergia, ipersensibilità, reazioni anafilattiche, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, prurito, edema (palpebre, gola, intraorale, viso, ecc.), malessere, fatica, mal di testa, vertigine, mal di schiena, dolore addominale, dolore lombare, diarrea, nausea, vomito, dolore al torace, eczema, eruzioni cutanee, arrossamento, orticaria, arrossamento del viso, febbre, rigidità, sudorazione anormale, spasmo muscolare, tosse, raucedine, ronzio auricolare, sbadigli, visione anormale, sapori strani, sensazione di odori strani o emolisi.
- 5) Una cattiva conservazione o inadeguato maneggiamento durante il trasporto o l'utilizzo (urti meccanici, esposizione a temperature alte o congelamento, ecc.) possono aumentare il rischio di perdita di sangue. Se si riscontra la presenza di una perdita di sangue interrompere l'emodialisi ed adottare misure adeguate. Il medico responsabile deve decidere se reinfondere o no al paziente il sangue presente nel circuito extracorporeo.
- 6) Altre complicanze si possono verificare a causa di malfunzionamento, difetto della macchina per dialisi o errore di procedura nel corso dell'uso, come una perdita di sangue, surriscaldamento del sangue, emolisi, ultrafiltrazione eccessiva e squilibrio elettrolitico. Consultare le istruzioni per l'uso della macchina per evitare tali complicanze.
- 7) Eventuali incidenti gravi collegati al dializzatore devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente del luogo di residenza dell'utente e/o del paziente.

VII. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. Avvertenze e precauzioni generali

- In caso di anomalie riscontrate durante e/o dopo l'uso del dializzatore, consultare il proprio medico.
- 1) Riutilizzo
Il "FILTRYZER" è un dispositivo medico da usare SOLO come prodotto MONOUSO. Il suo riuso può provocare danni al prodotto (perdite ematiche, variazioni delle prestazioni, ecc.) e al paziente (infezioni causate da contaminazione microbica,

effetti avversi dovuti a residui del processo di sterilizzazione e/o dei componenti ematici, ecc.).

- 2) **Attenzione particolare**
Si raccomanda di fare particolare attenzione in caso di pazienti anziani, in gravidanza o pediatrici.
- 3) **Risciacquo**
I dializzatori "FILTRYZER" sono pre-riempiti con acqua sterile. Prima di iniziare la dialisi, il lato sangue dei dializzatori deve essere lavato con soluzione fisiologica sterile o dialisato e il lato dialisato con il dialisato stesso per evitare l'emolisi.
- 4) **Macchina per dialisi**
Poiché i dializzatori "FILTRYZER" presentano un alto coefficiente di ultrafiltrazione, devono essere usati esclusivamente su macchine per dialisi dotate di dispositivo di controllo dell'ultrafiltrazione.
- 5) **Conservazione**
I dializzatori "FILTRYZER" devono essere conservati e trasportati a temperature comprese tra 5°C (41°F) e 30°C (86°F). Evitare l'esposizione a condizioni ambientali estreme (luce solare diretta, umidità eccessiva, ambiente bagnato e/o troppo secco, congelamento).
- 6) **Maneggiamento**
I dializzatori "FILTRYZER" sono realizzati con vari componenti di plastica. Evitare vibrazioni eccessive o urti meccanici durante il maneggiamento e l'utilizzo. Non battere sulla testata del dializzatore con una clamp né con altri oggetti metallici per eliminare le bolle d'aria o reinfondere il sangue.
- 7) **Sostanze chimiche**
Evitare rigorosamente il contatto tra il dispositivo e l'alcol (sterilizzante) o altri solventi organici. Tale contatto potrebbe causare distorsioni o incrinature del dispositivo.
- 8) **Controllo di qualità del dialisato**
Seguire le norme di ogni singolo paese. Usare dialisato puro, poiché il dialisato potrebbe entrare nel flusso ematico del paziente attraverso il meccanismo di retrofiltrazione.

2. Precauzioni da adottare prima della dialisi

- 1) Non usare il dializzatore se appare danneggiato o se la confezione non è integra.
- 2) Non usare il dializzatore se sembra che ci sia una perdita d'acqua, come gocce d'acqua nella confezione, tappo che non chiude bene l'attacco sangue o del dialisato e un accumulo di grandi quantità d'aria nel comparto sangue o dialisato.
- 3) Collegare i connettori della linea sangue agli attacchi sangue, inserendoli con l'angolazione corretta e ruotandoli per assicurarsi che siano ben stretti per evitare il distacco del collegamento, perdite di soluzione fisiologica o sangue o la rottura degli attacchi sangue.
- 4) Il dializzatore deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione, il lavaggio e il riempimento.
- 5) Evitare in ogni modo che bolle d'aria rimangano o arrivino nel comparto sangue durante la procedura di lavaggio e riempimento.

3. Precauzioni da adottare durante la dialisi

- 1) Assicurarsi che non ci siano perdite sulla connessione del sangue e del dialisato.
- 2) La pressione di membrana (TMP) non deve eccedere i 66 kPa (500 mmHg). Una TMP superiore a 66 kPa (500 mmHg) può causare una perdita di sangue o la sconnessione delle linee ematiche dall'attacco del dializzatore.
- 3) La performance del dializzatore potrebbe risultare diminuita qualora il dispositivo venisse utilizzato al di sotto del flusso raccomandato o in orientamenti diversi da quello indicato.
- 4) Il metodo di somministrazione e la dose di anticoagulante (ad es. eparina) devono essere stabiliti da un medico per ciascun paziente. Adottare precauzioni speciali, compreso il monitoraggio del tempo di coagulazione durante la dialisi, per i pazienti con tendenza all'emorragia o affetti da disturbi di coagulazione.
- 5) Se durante la dialisi si osserva la presenza di bolle d'aria, perdite di sangue, coaguli o emolisi, adottare rapidamente trattamenti adeguati, tra cui l'interruzione della dialisi o la sostituzione del dializzatore.
- 6) Quando il farmaco prescritto deve essere somministrato prima o durante la dialisi tenere in considerazione varie condizioni quali percorso, tempistica e dose perché la dialisi può eliminarlo o modificarne gli effetti. Speciale attenzione deve essere data ai pazienti sottoposti a trattamento con inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina.
- 7) A fine dialisi non usare l'aria per restituire il sangue al paziente. Reinfondere il sangue al paziente effettuando un lavaggio con soluzione fisiologica, reinfondendo la maggior quantità possibile di sangue del paziente tenendo il dializzatore in posizione verticale e ruotandolo intorno al suo asse se necessario.

VIII. PROCEDURA DI DIALISI

Adottare guanti protettivi e una tecnica asettica per evitare di contaminare il sangue del paziente quando si collega la linea sangue al dializzatore, quando si

prelevano campioni di sangue o si reinfonde il sangue dal circuito extracorporeo. Per questo dializzatore è consigliato un circuito extracorporeo con i connettori conformi alla norma ISO 8638 o ISO 8637-2.

Un esempio di procedura è riportato di seguito.

1. Preparazione per la dialisi

- 1) Estrarre il dializzatore dalla confezione e infilarlo nell'apposito supporto.
- 2) Appendere un contenitore di soluzione fisiologica sterile (1000 mL o più) ad uno stativo e collegare la linea di infusione arteriosa al contenitore.
- 3) Riempire la linea del sangue arterioso di soluzione fisiologica, prima il lato del connettore dell'accesso vascolare e poi quello del connettore del dializzatore. Clampare entrambe le estremità della linea arteriosa (Fig. 1).
- 4) Collegare la linea venosa all'attacco venoso del dializzatore (Fig. 2).
- 5) Collegare con cautela la linea arteriosa piena di soluzione fisiologica all'attacco arterioso assicurandosi di non far entrare dell'aria nel dializzatore. Se si osserva la presenza di bolle d'aria nell'attacco arterioso eliminarle premendo il gocciolatore venoso (Fig. 3).
- 6) Lavare il lato sangue del dializzatore e la linea sangue con più di 1000 mL di soluzione fisiologica a circa 100 mL/min. (Fig. 4).
- 7) Collegare le linee del dialisato ai rispettivi attacchi in modo che il dialisato fluisca controcorrente rispetto al flusso ematico. Eliminare eventuali bolle d'aria e lavare il lato dialisato con un flusso di dialisato pari a 500 mL/min. (Fig. 5). Far fluire il dialisato per almeno 5 minuti. Nel corso di questa procedura evitare qualsiasi ultrafiltrazione.
- 8) Riempire il dializzatore e le linee sangue con più di 500 mL di soluzione fisiologica eparinizzata e assicurarsi che non ci siano bolle d'aria all'interno del dializzatore lavandolo ripetutamente. Nel caso compaiano quantità rilevanti di bolle d'aria, sostituire il dializzatore (Fig. 6).
- 9) Controllare che la cameretta venosa sia piena per circa 3/4.
- 10) Clampare la linea venosa vicino all'estremità distale.

2. Dialisi

- 1) Lasciare fluire il dialisato dopo aver impostato un valore di filtrazione pari a 0 mL/h, nel caso non si sia provveduto a farlo fluire in precedenza.
- 2) Collegare la linea arteriosa alla cannula/ago fistola arterioso del paziente.
- 3) Aprire la clamp sia della linea arteriosa che di quella venosa e avviare la pompa sangue a 50-100 mL/min. Quando il sangue arriva all'estremità della linea venosa, fermare la pompa sangue e collegare la linea venosa alla cannula/ago fistola venoso del paziente.
- 4) Aumentare gradualmente il flusso del sangue e l'ultrafiltrazione ai livelli necessari per ciascun paziente.
- 5) Per la procedura di conferma delle funzioni di allarme della macchina per dialisi prima del trattamento, seguire le istruzioni del produttore della macchina.

3. Completamento della dialisi

- 1) Ridurre il più possibile le pressioni sia sul lato sangue che su quello dialisato e fermare la pompa sangue dopo 5 minuti di perfusione senza ultrafiltrazione.
- 2) Collegare un contenitore contenente 300 mL o più di soluzione fisiologica alla linea di infusione.
- 3) Sfruttando la gravità, far fluire la soluzione fisiologica nel lato di accesso del sangue arterioso per reinfondere il sangue on-line. Clampare l'estremità della linea ed estrarre la cannula/ago fistola arterioso asetticamente.
- 4) Staccare la linea del sangue arterioso dalla pompa sangue.
- 5) Mediante gravità e soluzione fisiologica iniziare la restituzione del sangue dal dializzatore e dalle linee sangue.
- 6) Clampare l'estremità della linea venosa ed estrarre la cannula/ago fistola venoso asetticamente.
- 7) Smaltire il dializzatore, le linee e gli altri prodotti monouso secondo le modalità in vigore nell'ente.

IX. GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 1) I dializzatori "FILTRYZER" sono prodotti secondo le specifiche e in accordo alle linee guida GMP. Toray sostituirà gratuitamente il dializzatore che presenti difetti di fabbricazione. Se necessario, Toray chiederà la restituzione del dializzatore e di tutta la relativa confezione per ricercare le cause del problema ed adottare misure correttive del caso.
- 2) Toray non è responsabile per alcun danno, sia che si tratti di danni al prodotto, che lesioni al paziente o qualsiasi altro problema provocato da cattivo uso, maneggiamento, operazione e conservazione impropri ad opera del cliente.
- 3) Toray non è responsabile per alcun danno al prodotto, lesioni al paziente né qualsiasi altro problema causato dal riutilizzo del dializzatore.

X. ALTRE INFORMAZIONI

Le seguenti informazioni sono disponibili su richiesta:

- 1) dettagli dei metodi di prova
- 2) caratteristiche della performance *in vivo*.

Gebrauchsanweisung für FILTRYZER BG Serie

Bitte vor Verwendung des Dialysators „FILTRYZER“, Serie BG, sorgfältig lesen.

I. THERAPEUTISCHER ZWECK

Der Dialysator „FILTRYZER“ ist eine künstliche Niere (Hohlfaserkapillare). Durch die Hämodialyse reinigt er das Blut von Urämietoxinen und Wasser, um den Gesundheitszustand von niereninsuffizienten Patienten zu verbessern.

II. INDIKATIONEN

„FILTRYZER“ Dialysatoren sind für den EINMALGEBRAUCH bei akuter oder chronischer Hämodialyse angezeigt. Diese Dialysatoren dürfen ausschließlich auf Anweisung eines Arztes und von ausgebildetem medizinischem Personal, oder durch eigens trainierte Patienten/Pfleger unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

III. KONTRAINDIKATIONEN

Es sind keine besonderen Kontraindikationen für diesen Dialysator bekannt. Die allgemeinen Kontraindikationen der Hämodialyse sind zu beachten.

IV. STERILISATION

„FILTRYZER“ Dialysatoren sind gammastrahlensterilisiert und pyrogenfrei (Blutseite).

V. LEISTUNG UND SPEZIFIKATIONEN

Siehe beiliegende technische Daten.

VI. UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

- 1) Während und nach Dialyse bitte die Patienten sorgfältig überwachen. Patienten mit einer Vorgeschichte von Allergie und Überempfindlichkeit, mit intradialytischen hypotensiven Episoden, mit übersteigter Immunfunktion und wenn erstmalig an der Dialyse mit „FILTRYZER“ sollten sorgfältig überwacht werden. Im Falle von unerwünschten Reaktionen bitte geeignete Massnahmen ergreifen, einschliesslich eventuelles Abbrechen der Dialyse.
- 2) Das Gleichgewichtsstörung-Syndrom kann insbesondere in der Anfangsphase der Dialysebehandlung auftreten, etwa bei untergewichtigen Patienten, bei älteren Patienten oder bei Patienten mit raschem Wasserentzug und beim Wechsel zu einem Dialysefilter mit höherer Clearance oder größerer effektiver Oberfläche. Geeignete Massnahmen, einschliesslich eventuelles Abbrechen der Dialyse, sollten ergriffen werden, wenn folgende Symptome oder Anzeichen von Gleichgewichtsstörungen auftreten: Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinstrübung, Blutdruckabfall oder Krämpfe.
- 3) Proteinverlust, z. B. bei Albumin, kann, in Abhängigkeit vom Dialyseverfahren, ansteigen. Bitte Patientenzustand und Albuminwerte beobachten.
- 4) Geeignete Massnahmen, einschliesslich Abbruch der Dialyse, müssen erfolgen, wenn die nachstehenden Symptome, die bei der Routinedialyse gelegentlich auftreten können, beobachtet werden: Atemnot, Brustschmerzen, Blutdruckanstieg, oder –abfall, Bewusstlosigkeit, Hypoxämie, Schock, Herzrasen, Tachykardie, Allergie, Hypersensitivität, anaphylaktische Reaktionen, Absenkung der weissen Blutkörperchen oder Blutplättchen, Eosinophilie, Pruritus, Ödeme (Augenlid, Rachen, intraoral, Gesicht usw.), Unwohlsein, Ermüdung, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Schmerzen im Lendewirbelbereich, Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, unangenehmes Gefühl (Brust usw.), Ekzeme, Ausschlag, rotes Anlaufen, Urtikaria, gerötetes Gesicht, Fieber, Rigor, abnormes Schwitzen, Muskelkrampf, Husten, Heiserkeit, Tinnitus, Gähnen, Sehstörungen, unangenehmer Geschmack oder Geruch oder Hämolyse.
- 5) Unsachgemäße Handhabung oder Lagerung bei Transport oder Gebrauch (mechanische Stöße, zu hohe oder zu niedrige Temperatur, usw.) können das Risiko von Blutlecks erhöhen. Kommt es zum Blutleck, muss die Hämodialyse abgebrochen und geeignete Massnahmen ergriffen werden. Der behandelnde Arzt muss entscheiden, ob das Blut aus dem extrakorporalen Kreislauf zurückgeführt wird oder nicht.
- 6) Durch Funktionsstörung, einen Defekt des Dialysegerätes oder einen Fehler bei der Bedienung des Gerätes während des Gebrauchs können weitere Komplikationen wie Blutverlust, zu starke Erwärmung des Blutes, Hämolyse, übermäßige Ultrafiltration und Elektrolytungleichgewicht auftreten. Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung des Dialysegerätes, um derartige Komplikationen zu vermeiden.
- 7) Im Falle einer Dialysator-bedingten ersten Nebenwirkung bitte den Hersteller und die für den Verwender und/oder Patienten zuständige Behörde informieren.

VII. WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Allgemeine Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Wiederverwendung „FILTRYZER“ ist ein ausschließlich dem EINMALGEBRAUCH vorbehaltenes Medizinprodukt. Dessen Wiederverwendung kann Produktschäden verursachen (Blutlecks, Leistungsschwankungen, usw.) und auch dem Patienten Schaden zufügen (Infektionen durch mikrobiologische Kontamination,

Nebenwirkungen durch Reinigungs-, bzw. Spuren von Blutbestandteilen, usw.).

- 2) Besondere Aufmerksamkeit Besondere Aufmerksamkeit ist bei älteren und schwächeren Patienten sowie bei Kindern geboten.
- 3) Vorspülung „FILTRYZER“ Dialysatoren sind mit sterilem Wasser gefüllt. Um Hämolyse vorzubeugen müssen, vor dem Einleiten der Dialyse, die Blutseite des Dialysators mit steriler physiologischer Kochsalzlösung, oder Dialysat, und die Dialysatseite mit Dialysat vorgespült werden.
- 4) Dialysegerät Da „FILTRYZER“ Dialysatoren eine hohe Filtrationsrate aufweisen, dürfen sie nur mit Dialysegeräten mit volumengesteuerter Ultrafiltrationskontrolle verwendet werden.
- 5) Aufbewahrung „FILTRYZER“ muss bei Temperaturen zwischen 5°C (41°F) und 30°C (86°F) aufbewahrt und transportiert werden. Das Produkt darf keinen extremen Umweltbedingungen (direktes Sonnenlicht, übermäßige Feuchtigkeit, Nässe, Trockenheit, niedrige Temperaturen) ausgesetzt werden.
- 6) Handhabung „FILTRYZER“ besteht aus verschiedenen Kunststoffkomponenten. Bei Handhabung und Gebrauch sind extreme Vibrationen oder mechanische Stöße zu vermeiden. Bitte nicht mit Klemmen oder anderen metallenen Gegenständen auf den Dialysatorkopf klopfen, um Luftblasen zu entfernen oder das Blut zurückzuführen.
- 7) Chemikalien Vermeiden Sie strikt den Kontakt des Gerätes mit Alkohol (zum Sterilisieren) oder sonstigen organischen Lösungsmitteln. Ein solcher Kontakt kann zu Verformungen oder Brüchen an dem Gerät führen.
- 8) Qualitätskontrolle der Dialyseflüssigkeit erfolgt Gemäß den landesüblichen Vorschriften. Bitte unkontaminiertes Dialysat verwenden, da durch Rückfiltration und/oder Rückdiffusion Dialysat in die Blutbahn gelangen kann.
2. Vorsichtsmaßnahmen vor der Dialyse
- 1) Bei Schäden an der Verpackung oder am Dialysator darf der Dialysator nicht verwendet werden.
- 2) Der Dialysator darf nicht verwendet werden bei Anzeichen von Wasserlecks, etwa Wassertropfen in der Verpackung, schlechter Kappenverschlüsse am Blut- oder Dialysatanschluß, oder einer größeren Menge Luft im Blut- oder Dialysatkompartiment.
- 3) Schließen Sie die Luer-Lock-Anschlüsse des Blutschlauchs an die Blutanschlüsse an, indem Sie sie in geeigneten Winkel einführen und festdrehen, um einen festen Sitz zu gewährleisten und das Abösen der Verbindung, das Austreten von Kochsalzlösung oder Blut und den Bruch der Blutports zu vermeiden
- 4) Der Dialysator sollte unmittelbar nach Öffnen der Produktverpackung eingesetzt, vorgespült und gefüllt werden.
- 5) Beim Vorspülen und Füllen achten Sie besonders darauf, dass keine Luftblasen in das Blutkompartiment gelangen oder dort verbleiben.
3. Vorsichtsmaßnahmen während der Dialyse
- 1) Stellen Sie sicher, dass an den Stellen von Blut- und Dialysatanschluss bestimmte Lecks auftreten.
- 2) Der Transmembrandruck (TMP) darf 66 kPa (500 mmHg) nicht überschreiten. Bei einem TMP über 66 kPa (500 mmHg) kann es zu Blutlecks oder Abfall der Blutschläuche von den Dialysatoranschlüssen kommen.
- 3) Die Dialysatorleistung kann abfallen, wenn der empfohlene Blutfluss unterschritten, oder der Filter anders verwendet wird, als in der Gebrauchsanweisung vorgesehen.
- 4) Dosierung und Anwendungsmodus eines Antikoagulans, wie z.B. Heparin, müssen für jeden Patienten vom Arzt bestimmt werden.
- Bei Patienten mit Neigung zu Hämorrhagie oder Koagulationsstörung sind während der Dialyse zusätzliche Versorgungsschritte einschliesslich der Überwachung der Koagulationszeit vorzusehen.
- 5) Werden während der Dialyse Luftblasen, Blutlecks, Gerinnung oder Hämolyse beobachtet, müssen sofort geeignete Massnahmen einschliesslich Abbruch der Dialyse oder Auswechslung des Dialysators erfolgen.
- 6) Werden vor oder während der Dialyse Medikamente verabreicht, so müssen Verabreichungsweg, Zeitpunkt und Dosis vorab bestimmt werden, da Arzneimittel durch die Dialyse abgebaut, bzw. ihre Wirkung modifiziert werden kann.
- 7) Am Ende der Dialyse sollte die Blutrückführung keinesfalls mit Luft, sondern nur durch Kochsalzlösung unter atmosphärischem Druck erfolgen. Um so viel Patientenblut wie möglich zurückzuführen sollte der Dialysator vertikal gehalten, bzw. um seine eigene Achse gedreht werden.

VIII. VORGEHENSWEISE BEI DER DIALYSE

Der Anschluß der Blutschläuchsysteme, das Entnehmen von Blutproben und das Abhängen des Patienten vom Dialysator sollten mit Schutzhandschuhen und unter aseptischen Bedingungen vorgenommen werden, um Kontaminationen zu vermeiden. Für diesen Dialysator werden Konnektoren nach ISO 8638, oder ISO 8637-2 für extrakorporalen Kreislauf empfohlen.

Die folgende Vorgehensweise ist als ein Beispiel zu verstehen.

1. Vorbereitung für die Dialyse

- 1) Nehmen Sie den Dialysator aus seiner Verpackung und bringen Sie ihn am Dialysatorenhalter an.
- 2) Hängen Sie einen Beutel mit steriler physiologischer Kochsalzlösung (1000 mL oder mehr) an einen Infusionsständer und schließen Sie den arteriellen Infusionsschlauch an den Beutel an.
- 3) Füllen Sie den arteriellen Blutschlauch mit physiologischer Kochsalzlösung, zunächst auf der Seite des Gefäßzugangsanschlusses und dann auf der Seite des Dialysatoranschlusses. Klemmen Sie beide Enden des arteriellen Schlauchs ab. (Abb. 1)
- 4) Schließen Sie den venösen Schlauch an den venösen Anschluß des Dialysators an. (Abb. 2)
- 5) Schließen Sie den mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllten arteriellen Schlauch vorsichtig an den arteriellen Anschluß an und achten Sie darauf, dass dabei keine Luft in den Dialysator gelangt. Werden vereinzelte Luftblasen im arteriellen Anschluß beobachtet, entfernen Sie diese durch Zusammendrücken der venösen Tropfkammer. (Abb. 3)
- 6) Spülen Sie die Blutseite des Dialysators und den Blutschlauch mit mehr als 1000 mL physiologischer Kochsalzlösung bei einem Fluß von ca. 100 mL/min. (Abb. 4)
- 7) Schließen Sie die Dialysatschläuche so an die Dialysatanschlüsse an, dass das Dialysat gegenströmig zum Blutfluss fließt. Entfernen Sie jegliche Luftblasen und spülen Sie die Dialysatseite bei einem Fluß von ca. 500 mL/min mit Dialysat. (Abb. 5) Lassen Sie das Dialysat mindestens 5 Minuten lang fließen. Vermeiden Sie während dieses Vorgangs jegliche Ultrafiltration.
- 8) Füllen Sie Dialysator und Blutschläuche mit mehr als 500 mL heparinierter physiologischer Kochsalzlösung und stellen Sie durch wiederholtes Spülen sicher, dass keine Luftblasen im Dialysator verbleiben. Treten große Luftblasen aus den Kapillaren, bitte den Dialysator auswechseln. (Abb. 6)
- 9) Stellen Sie sicher, dass der venöse Blasenfänger zu circa 3/4 gefüllt ist.
- 10) Klemmen Sie den venösen Schlauch nahe dem distalen Ende ab.

2. Dialyse

- 1) Nach Stillstand bitte Dialysatfluss bei einer Filtrationsrate von 0 ml/h starten.
- 2) Schließen Sie den arteriellen Schlauch an die arterielle Kanüle des Patienten an.
- 3) Öffnen Sie die Klemmen sowohl der arteriellen als auch der venösen Linie und starten Sie die Blutpumpe mit 50-100 mL/min. Halten Sie die Blutpumpe an, sobald das Blut das Ende der venösen Linie erreicht und schließen Sie die venöse Linie an die venöse Kanüle an.
- 4) Erhöhen Sie Blutflussrate und Ultrafiltrationsrate schrittweise auf die Werte, die der einzelne Patient benötigt.
- 5) Für die Funktionskontrolle des Alarmsystems der Maschine bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers befolgen.

3. Beenden der Dialyse

- 1) Reduzieren Sie den Druck auf beiden Seiten, also der Blutseite und der Dialysatseite soweit wie möglich, und halten Sie die Blutpumpe nach 5 Minuten Perfusion ohne Ultrafiltration an.
- 2) Schließen Sie einen Beutel mit 300 mL oder mehr physiologischer Kochsalzlösung an die Infusionslinie an.
- 3) Lassen Sie unter Schwerkraft physiologische Kochsalzlösung in die arterielle Blutzugangsseite fließen, um das im Schlauch befindliche Blut zurückzuführen. Klemmen Sie das Ende des Schlauchs ab und ziehen Sie die arterielle Kanüle aseptisch heraus.
- 4) Hängen Sie den arteriellen Blutschlauch von der Blutpumpe ab.
- 5) Beginnen Sie das Blut aus Dialysator und den Blutschläuchen mittels Schwerkraft und physiologischer Kochsalzlösung zurückzuführen.
- 6) Klemmen Sie das Ende des Schlauchs ab und ziehen Sie die venöse Kanüle aseptisch heraus.
- 7) Verwerfen Sie Dialysator, Schläuche und andere Einwegprodukte entsprechend der Routine an Ihrer Einrichtung.

IX. GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- 1) „FILTRYZER“ wird entsprechend seinen Spezifikationen und in Übereinstimmung mit den regulatorischen Richtlinien für GMP hergestellt. Weist ein Dialysator Herstellungsfehler auf, wird er von Toray kostenlos ersetzt. Falls erforderlich wird Toray um die Rückgabe des schadhafte Dialysators und seiner gesamten Verpackung bitten, um Ursachenforschung betreiben und gegebenenfalls Fehler für die Zukunft ausschließen zu können.
- 2) Toray haftet für keinerlei Schäden, unabhängig davon, ob es sich um Produktschäden, Verletzung von Patienten oder etwaige andere Probleme durch falschen Gebrauch, unangemessene Handhabung, Verwendung oder Aufbewahrung durch den Kunden handelt.
- 3) Toray haftet für keinerlei Produktschäden, Verletzung von Patienten oder etwaige andere Probleme durch Wiederverwendung des Dialysators.

X. WEITERE INFORMATIONEN

Folgende Informationen können erfragt werden:

- 1) Details der Testmethoden
- 2) *In-vivo*-Leistungscharakteristika

Instrucciones de Uso FILTRYZER Serie BG

Lea estas instrucciones atentamente antes de usar el dializador "FILTRYZER" serie BG.

I. FINALIDAD PREVISTA

Los dializadores "FILTRYZER" son riñones artificiales (dializadores de fibra hueca) que eliminan las toxinas urémicas y el agua de la sangre mediante hemodiálisis para mejorar las condiciones de un paciente con insuficiencia renal.

II. INDICACIONES

Los dializadores "FILTRYZER" han sido diseñados PARA SER UTILIZADOS UNA SOLA VEZ en la hemodiálisis aguda o crónica. Estos dializadores deben usarse únicamente bajo prescripción médica y deben ser utilizados por personal médico capacitado o por un paciente / cuidador capacitado autorizado por un médico.

III. CONTRAINDICACIONES

No se conocen contraindicaciones especiales para este dializador. En general se aplican las mismas contraindicaciones referidas a la hemodiálisis.

IV. ESTERILIZACIÓN

Los dializadores "FILTRYZER" son esterilizados mediante rayos gamma y son apriógenos (lado de la sangre).

V. FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIONES

Consulte la información técnica adjunta.

VI. EVENTOS ADVERSOS

- 1) Deberá realizar un control especialmente cuidadoso de los pacientes con antecedentes de alergia, hipersensibilidad e hipotensión. Igualmente es necesario una monitorización de aquellos pacientes con actividad inmunológica elevada y aquellos tratamientos en los que se utiliza FILTRYZER por primera vez. Se deberá administrar un tratamiento adecuado, que incluya la interrupción de la diálisis, en caso de observar algún síntoma o signo de reacciones adversas.
- 2) El síndrome de desequilibrio puede aparecer sobretodo durante el periodo de iniciación del tratamiento con diálisis, aplicado a pacientes con bajo peso corporal, añosos. También en pacientes que requieren una elevada pérdida de líquidos en un corto periodo de tiempo, o al cambiar de dializador por uno más eficiente o con una superficie efectiva mayor. Se deberá administrar un tratamiento adecuado, que incluya la interrupción de la diálisis, en caso de observar alguno de los siguientes síntomas o signos del síndrome de desequilibrio: cefalea, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, disminución de la presión arterial o convulsiones.
- 3) La pérdida de proteína como la albúmina podría incrementarse dependiendo las condiciones del tratamiento. Observar las condiciones del paciente y los valores de Albúmina sérica.
- 4) Se deberá administrar un tratamiento adecuado, que incluya la interrupción de la diálisis, en caso de observar alguno de los síntomas que a continuación se detallan, los cuales pueden aparecer ocasionalmente en la diálisis normal: disnea, dolor de pecho, disminución o aumento de la presión arterial, pérdida de conciencia, hipoxemia, estado de shock, palpaciones, taquicardia, alergias, hipersensibilidad, reacciones anafilactoides, disminución del nivel de glóbulos blancos, disminución del nivel de plaquetas, eosinofilia, prurito, edema (párpado, glotis, intraoral, rostro, etc.), malestar general, cansancio, cefalea, vértigo, dolor de espalda, dolor abdominal, dolor lumbar, diarrea, mareos, vómitos, dolor de pecho, molestias, eczema, erupciones cutáneas, enrojecimientos, urticaria, enrojecimiento del rostro, pirexia, escalofríos, sudoración anormal, espasmos musculares, tos, ronquera, tinnitus, bostezos, visión anormal, sabor raro, sensación de olor desagradable o hemólisis.
- 5) La inadecuada manipulación o el incorrecto almacenamiento durante el transporte o el uso del dializador (choque mecánico, temperatura excesivamente alta o de congelamiento, etc.) puede aumentar el riesgo de pérdida de sangre. Cuando se comprueba la pérdida de sangre, es necesario interrumpir la hemodiálisis y adoptar medidas adecuadas. El médico interviniente debe decidir si retornar o no la sangre que se encuentra en el circuito extracorpóreo al paciente.
- 6) Pueden ocurrir otras complicaciones a causa del mal funcionamiento o defecto de la máquina dializadora o de un error de procedimiento en su uso, tal como pérdida de sangre, sobrecalentamiento de la sangre, hemólisis, ultrafiltrado excesivo y desequilibrio de electrolitos. Consulte las instrucciones de uso de la máquina para evitar esas complicaciones.
- 7) En caso de un incidente grave relacionado con este dializador, se debe informar al fabricante y a la autoridad competente en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

VII. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. Advertencias y precauciones generales

Consulte con su médico si encuentra alguna anomalía durante y/o después del uso del dializador.

1) Reutilización

"FILTRYZER" es un dispositivo médico diseñado para ser utilizado SOLAMENTE UNA VEZ. Su reutilización podría causar desperfectos al producto (fugas de sangre, cambios de rendimiento, etc.) y también

ocasionar lesiones al paciente (infección causada por contaminación microbiológica, reacciones adversas causadas por agentes residuales de reprocesamiento y/o componentes sanguíneos, etc.).

2) Cuidados especiales

Se deberá tener especial cuidado con ancianos, mujeres embarazadas o niños.

3) Lavado

Los dializadores "FILTRYZER" están precebados con agua esterilizada. Antes de comenzar la diálisis, el lado de la sangre de los dializadores se debe cebar con solución fisiológica salina estéril o dializado, y el lado del dializado se debe lavar con líquido de diálisis a fin de evitar hemólisis.

4) Máquina de diálisis

Como los dializadores "FILTRYZER" tienen una alta tasa de ultrafiltrado, se los debe usar en forma conjunta con máquinas de diálisis equipadas con un controlador del nivel de ultrafiltrado.

5) Almacenamiento

"FILTRYZER" se debe almacenar y transportar a temperaturas de entre 5°C (41°F) y 30°C (86°F). Se debe evitar su exposición a condiciones ambientales severas (luz solar directa, humedad excesiva, un medio mojado, sequedad, temperatura de congelamiento).

6) Manipulación

"FILTRYZER" está fabricado con diversos componentes plásticos. Se debe evitar la vibración excesiva o el choque mecánico durante su manipulación y uso. Evite golpear sobre el cabezal del dializador con un clamp u otro objeto metálico para eliminar las burbujas de aire o retornar la sangre.

7) Sustancias químicas

Evite en todo momento que el dispositivo entre en contacto con alcohol (esterilizador) o con cualquier otro disolvente orgánico, ya que de lo contrario podrían aparecer deformaciones o grietas en el dispositivo.

8) Control de calidad del dializado

Deberán respetarse las normas de cada país. El dializado contaminado puede ser causa de reacciones severas en los pacientes a través de los mecanismos de retrofiltración y/o retrodifusión.

2. Precauciones que se deben observar antes de la diálisis

- 1) No se debe utilizar el dializador si tiene aspecto dañado o su envoltorio está roto.
- 2) No se debe utilizar el dializador si parece existir una pérdida de agua, tal como, por ejemplo, gotas de agua sobre el envoltorio, un ajuste inadecuado de la tapa ya sea sobre el puerto de sangre o sobre el de dializado, o una acumulación de gran cantidad de aire en el compartimento de sangre o de dializado.
- 3) Conecte los conectores de cierre Luer de la línea de sangre a los puertos de sangre insertándolos en un ángulo correcto y girándolos para asegurarse de que están bien apretados, evitando así que se desacople la conexión, que se pierda sangre o solución fisiológica salina, o bien que se rompan los puertos de sangre.
- 4) El dializador se debe utilizar inmediatamente después de abrir el paquete, lavar y cebar.
- 5) Tenga especial cuidado de no permitir que queden burbujas de aire o que entren en el compartimento de la sangre durante el procedimiento de lavado y cebado.

3. Precauciones durante la diálisis

- 1) Confirme que no haya pérdida de fluidos en los lugares de conexión de la sangre y del dializado.
- 2) La presión transmembrana (en inglés, TMP) no debe exceder 66 kPa (500 mmHg). Una TMP superior a 66 kPa (500 mmHg) podría causar pérdida de sangre o la desconexión de las líneas de sangre de los conectores del dializador.
- 3) El rendimiento del dializador puede disminuir si el dispositivo se utiliza con una velocidad de flujo inferior a la recomendada o con una orientación diferente a la indicada.
- 4) El médico debe determinar para cada paciente el método de administración y la dosis de anticoagulante, tal como heparina. Se debe observar especial cuidado, incluido el control del tiempo de coagulación durante la diálisis, en el caso de los pacientes que tienen tendencia a hemorragias o que sufren de desórdenes de coagulación.
- 5) Si se observan burbujas de aire, pérdida de sangre, coágulos o hemólisis durante la diálisis, deberá administrarse de inmediato un tratamiento adecuado, que incluya la interrupción de la diálisis o la sustitución del dializador.
- 6) Cuando se tenga intención de administrar medicación antes de o durante la diálisis, tenga en cuenta diversas condiciones tales como la ruta, el momento oportuno y la dosis, debido a que la diálisis puede eliminarlas o modificar sus efectos. La vigilancia debe ser más estrecha si el paciente está en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina.
- 7) Al terminar la diálisis, no se debe emplear el lavado por aire de la sangre restante. Retorne la sangre del paciente lavando con solución fisiológica, devolviendo la mayor cantidad posible de sangre del paciente sosteniendo el dializador en posición vertical y rotándolo alrededor del eje, en caso de ser necesario.

VIII. PROCEDIMIENTO DE DIÁLISIS

Utilice quantes protectores y una técnica aséptica para

prevenir la contaminación de la sangre del paciente al conectar la línea de sangre con el dializador, al tomar muestras de sangre o al retornar la sangre del circuito extracorpóreo. Para este dializador se recomienda el circuito extracorpóreo cuyos conectores son conformes a la norma ISO8638 o a la norma ISO 8637-2.

El siguiente es un ejemplo del procedimiento a seguir.

1. Preparación para la diálisis

- 1) Saque el dializador del envoltorio y colóquelo sobre el soporte del mismo.
- 2) Cuelgue un contenedor de solución salina estéril (1000 mL o más) en el soporte de goteo, y conecte la línea de infusión arterial con el contenedor.
- 3) Llene la línea de sangre arterial con solución salina, en primer lugar del lado del conector de acceso vascular y luego del lado del conector del dializador. Sujete ambos extremos de la línea arterial con el clamp (Fig. 1).
- 4) Conecte la línea venosa al puerto venoso del dializador (Fig. 2).
- 5) Conecte con cuidado la línea arterial llena de solución fisiológica salina al puerto arterial, con la debida precaución para evitar que ingrese aire al dializador. Si se observa alguna burbuja de aire en el puerto arterial, sáquela apretando la cámara de goteo venoso (Fig. 3).
- 6) Lave el lado de sangre del dializador y la línea de sangre con más de 1000 mL de solución fisiológica salina a alrededor de 100 mL/min. (Fig. 4).
- 7) Conecte las líneas de dializado con los puertos de dializado de modo que el mismo fluya contra-corriente respecto del flujo de sangre. Elimine las burbujas de aire y lave el lado de dializado con dializado que fluya a alrededor de 500 mL/min. (Fig. 5). Deje fluir el dializado por lo menos durante 5 minutos. Evite cualquier ultra-filtrado durante este procedimiento.
- 8) Ceba las líneas de dializado y de sangre con más de 500 mL de solución fisiológica heparinizada, y confirme que no haya burbujas de aire en el dializador, lavando repetidamente. En caso de que aparezca una acumulación de burbujas no eliminables, sustituya el dializador (Fig. 6).
- 9) Confirme que la cámara atrapaburujas esté llena hasta 3/4 de su capacidad.
- 10) Sujete la línea venosa con un clamp cerca del extremo distal.

2. Diálisis

- 1) Flujo de líquido de diálisis tras establecer una tasa de ultrafiltración de 0 mL/h si no ha habido flujo de líquido de diálisis.
- 2) Conecte la línea arterial a la cánula arterial del paciente.
- 3) Abra los clamps de las líneas arteriales y venosas y arranque la bomba de sangre a 50-100 mL/min. Cuando la sangre llegue al extremo de la línea venosa, detenga la bomba de sangre y conecte la línea venosa con la cánula venosa.
- 4) Aumente gradualmente la velocidad del flujo de sangre y la velocidad de ultrafiltrado a los niveles requeridos por cada paciente.
- 5) Tras la señal acústica del monitor de diálisis previa al tratamiento de diálisis, siga las instrucciones del fabricante.

3. Finalización de la diálisis

- 1) Reduzca las presiones en los lados de la sangre y del dializado tanto como fuere posible y detenga la bomba de sangre después de 5 minutos de perfusión sin ultrafiltrado.
- 2) Conecte un contenedor de 300 mL o más de solución salina a la línea de infusión.
- 3) Por efecto de la gravedad, deje que el flujo de solución salina que se encuentra del lado de acceso de sangre arterial retorne la sangre de la línea. Ajuste con un clamp el extremo de la línea y retire la cánula arterial asépticamente.
- 4) Retire la línea de sangre arterial de la bomba de sangre.
- 5) Por efecto de la gravedad, con solución fisiológica salina, inicie el retorno de sangre del dializador y las líneas de sangre.
- 6) Sujete el extremo de la línea con un clamp y retire la cánula venosa asépticamente.
- 7) Deseche el dializador, las líneas y demás elementos desechables del modo aprobado por su institución.

IX. GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

- 1) "FILTRYZER" es fabricado de acuerdo con sus especificaciones y cumple con las pautas regulatorias GMP. Toray cambiará sin cargo cualquier dializador que presente defectos de fabricación. En caso de ser necesario, Toray solicitará la devolución del propio dializador y todo el envase del mismo a los efectos de investigar la causa y adoptar medidas correctivas, en caso de corresponder.
- 2) Toray no será responsable por ningún tipo de daños, independientemente de que se trate de daños de los productos, lesiones del paciente ni cualquier otro problema causado por el uso incorrecto, la inadecuada manipulación, manejo y almacenamiento por parte del cliente.
- 3) Toray no será responsable por ningún daño de los productos, lesiones del paciente ni ningún otro problema causado por la reutilización del dializador.

X. INFORMACIÓN ADICIONAL

La siguiente información se puede obtener mediante solicitud.

- 1) Detalle de los métodos de prueba
- 2) Características de funcionamiento *in vivo*.

Gebruiksaanwijzing voor FILTRYZER BG Serie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u de "FILTRYZER" BG-serie dialysator gebruikt.

I. BESTEMMING

De "FILTRYZER" dialysatoren zijn kunstmatige nieren (holle-vezeldialysatoren) die uremische toxines en water uit het bloed verwijderen door hemodialyse om de gezondheid van patiënten met nierfalen te verbeteren.

II. INDICATIES

De indicatie voor de FILTRYZER dialysatoren is EENMALIG GEBRUIK bij acute of chronische hemodialyse. Deze dialysatoren moeten altijd worden gebruikt onder de verantwoordelijkheid van een arts, door hiertoe opgeleid medisch personeel of door een patiënt/verzorgers die hiertoe is opgeleid en daarvoor toestemming heeft gekregen van een arts.

III. CONTRA-INDICATIES

Speciale contra-indicaties voor deze dialysator zijn niet bekend. Over het algemeen zijn de contra-indicaties voor hemodialyses van toepassing.

IV. STERILISATIE

"FILTRYZER" dialysatoren zijn met gammastralen gesteriliseerd en nietpyrogene (Bloedzijde).

V. EIGENSCHAPPEN EN SPECIFICATIES

Raadpleeg de bijgevoegde technische gegevens.

VI. BIJWERKINGEN

- 1) Patiënten moeten tijdens en na dialyse zorgvuldig worden bewaakt. Bij bepaalde patiënten met een voorgeschiedenis van allergie en overgevoeligheid, patiënten bij wie de bloeddruk daalde door hemodialyse, patiënten bij wie de immuunfunctie versnelt en patiënten die "FILTRYZER" voor de eerste keer gebruiken, moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Er moeten passende maatregelen worden getroffen, inclusief stopzetting van dialyse, als er symptomen of tekenen of bijwerkingen worden waargenomen.
- 2) Het disequilibriumssyndroom kan optreden tijdens de inleidende periode van dialysebehandeling, met name bij oudere patiënten met een laag lichaamsgewicht, of patiënten waarbij in korte tijd snel water moeten worden verwijderd, of bij het overgaan naar een dialysator die efficiënter is of een groter effectief oppervlak heeft. Er moeten passende maatregelen worden getroffen, inclusief stopzetting van dialyse, als er symptomen of tekenen van het disequilibriumssyndroom worden waargenomen: hoofdpijn, misselijkheid, braken, verstoord bewustzijn, gedaalde bloeddruk of convulsie.
- 3) Het verlies van eiwitten, zoals albumine, kan toenemen, afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden. Observeer de toestand van de patiënt en de waarden van de serumalbumine.
- 4) Er moeten passende maatregelen worden getroffen, inclusief de stopzetting van de dialyse, als de volgende symptomen, die soms bij een gebruikelijke dialyse kunnen optreden, worden waargenomen: dyspneu, pijn op de borst, verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk, bewustzijnsverlies, hypoxemie, shock, hartkloppingen, tachycardie, allergie, overgevoeligheid, anafylactische reacties, afgenomen witte bloedcellen, afgenomen bloedplaatjes, eosinofilie, prurit, oedeem (ooglid, keel, intraoraal, gezicht, enz.), malaise, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, rugpijn, buikpijn, lumbale pijn, diarree, misselijkheid, braken, ongemak op de borst, ongemak, eczeem, uitslag, roodheid, urticaria, rood gezicht, pyrexie, stijfheid, abnormaal zweten, spierkrampen, hoest, heesheid, tinnitus, geeuwen, abnormaal zicht, eigenaardige smaak, vreemde geursensatie of hemolyse.
- 5) De onjuiste hantering of de opslag tijdens het transport of de bediening (mechanische schok, extreem hoge of lage temperaturen, etc.) kan het risico op bloedlekkage vergroten. Wanneer bloedlekkage wordt waargenomen, moet de hemodialyse worden gestaakt en moeten passende maatregelen worden genomen. De behandelend arts moet beslissen of het bloed wel of niet in het vanaf het extracorporele circuit naar de patiënt wordt teruggestuurd.
- 6) Andere complicaties kunnen optreden als gevolg van storingen, een defect van de dialysemachinerie of een procedurefout in het gebruik ervan, zoals bloedverlies, oververhitting van het bloeds, hemolyse, overmatige ultrafiltratie en onbalans van de elektrolyten. Raadpleeg de instructies voor de machine om dergelijke complicaties te voorkomen.
- 7) Bij een ernstig incident met betrekking tot deze dialysator dient dit te worden gemeld aan de fabrikant en aan het bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor de gebruiker en/of de patiënt.

VII. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

1. Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Raadpleeg de arts bij een afwijking tijdens en/of na gebruik van de dialysator.

1) Hergebruik

"FILTRYZER" is een medisch hulpmiddel dat VOOR EENMALIG GEBRUIK is bedoeld. Het hergebruik kan productbeschadigingen (bloedlekkage, veranderingen van de prestaties,

enz.) en ook patiëntletsel veroorzaken (infectie veroorzaakt door microbiologische besmetting, bijwerkingen veroorzaakt door achtergebleven opwerkingsmiddelen en/of bloedbestanddelen, enz.).

- 2) Speciale zorg
Speciale zorg wordt aanbevolen voor oudere, zwangere of pediatrische patiënten.
- 3) Spoelen
"FILTRYZER" dialysatoren zijn gevuld met steriel water. Voordat met dialyse wordt begonnen, moet de bloedzijde van de dialysatoren worden gespoeld met een isotone natriumchloride-oplossing of dialysaat, en de kant van het dialysaat met dialysaat om elk risico op hemolyse te vermijden.
- 4) Dialysemachine
Aangezien de "FILTRYZER" dialysatoren een hoge ultrafiltratiesnelheid hebben, moeten ze in combinatie met dialysemachines worden gebruikt die zijn uitgerust met een ultrafiltratiesnelheidsbesturing.
- 5) Opslag
"FILTRYZER" moet worden opgeslagen en getransporteerd bij temperaturen tussen 5°C (41°F) en 30°C (86°F). De blootstelling aan zware omgevingsomstandigheden moet worden vermeden (direct zonlicht, extreme vochtigheid, natheid, droogheid, temperaturen onder nul).
- 6) Hantering
"FILTRYZER" is gemaakt van verschillende onderdelen van plastic. Overmatige trillingen of mechanische schokken moeten tijdens de hantering en de bediening worden vermeden. Tik niet op de bovenkant van de dialysator met een klem of een ander metaal voorwerp om luchtballen te verwijderen of om het bloed terug te brengen.
- 7) Chemicaliën
Vermijd elk contact tussen het apparaat en alcohol (sterilisatiemiddel) of andere organische oplosmiddelen. Dergelijk contact kan leiden tot vervormingen of scheuren van het apparaat.
- 8) Kwaliteitscontrole dialysaat
Volg de normen van elk land. Gebruik schoon dialysaat omdat dialysaat in de bloedstroom van de patiënt kan komen door de mechanismen van terugfiltratie en/of terugdiffusie.

2. Voorafgaan aan de dialyse te nemen voorzorgen

- 1) De dialysator mag niet worden gebruikt als deze beschadigd lijkt te zijn of als het pakket gescheurd is.
- 2) De dialysator mag niet worden gebruikt als er sprake van een waterlek lijkt te zijn, zoals waterdruppels in de verpakking, een onjuiste bescherming van de bloed-poort of dialysaat-poort, of een ophoping van een grote hoeveelheid lucht in het bloed- of dialysaatcompartiment.
- 3) Sluit de Luer lockconnectoren van de bloedlijn aan op de bloedpoorten door ze in een juiste hoek aan te brengen en te draaien om een hechte aansluiting te garanderen en te voorkomen dat de verbinding loskomt, dat er lekkages van de zoutoplossing of bloed optreden en dat de bloedpoorten afbreken.
- 4) Gebruik de dialysator onmiddellijk na het openen van de verpakking en na het spoelen en primen.
- 5) Neem alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat luchtballen de dialysator binnenkomen of erin aanwezig blijven gedurende deze 2 fasen.

3. Voorzorgsmaatregelen tijdens de dialyse

- 1) Bevestig dat er geen vloeistoflekkeg is bij de bloedverbinding en de dialysaatverbinding.
- 2) De transmembraandruk (TMP) mag niet hoger zijn dan 66 kPa (500 mmHg). Een TMP die hoger is dan 66 kPa (500 mmHg) kan bloedlekkage of ont koppeling van de bloedleidingen van de dialysatorverbindingen veroorzaken.
- 3) De prestaties van de dialysator kunnen verminderen als het apparaat onder de aanbevolen stroomsnelheid wordt gebruikt of in andere richtingen dan aangegeven.
- 4) De toedieningsmethode en dosis van een anticoagulans zoals heparine moeten voor elke patiënt door een arts worden bepaald. Speciale zorg, waaronder de monitoring van de stollingstijd tijdens de dialyse, moet worden genomen voor patiënten met een neiging tot bloeding of die een bloedstollingsstoornis hebben.
- 5) Als er tijdens de dialyse luchtballen, een bloedlek, stolling of hemolyse worden waargenomen, moeten er onmiddellijk passende acties worden ondernomen, waaronder de stopzetting van de dialyse of vervanging van de dialysator.
- 6) Wanneer de toediening van geneesmiddelen vóór of tijdens dialyse is gepland, bekijk dan de verschillende omstandigheden zoals de route, timing en dosis, omdat de dialyse deze geneesmiddelen kan verwijderen of hun effecten kan wijzigen. Speciale zorg wordt aanbevolen voor patiënten die angiostatische vaatverterende enzymremmers krijgen.
- 7) Bij het voltooiën van de dialyse mag het resterende bloed niet worden gespoeld met lucht. Voer het bloed van de patiënt terug door te spoelen met een zoutoplossing, waarbij zoveel mogelijk bloed van de patiënt wordt teruggevoerd door de dialysator verticaal te houden en deze indien nodig om zijn as te laten draaien.

VIII. PROCEDURE VAN DE DIALYSE

Gebruik beschermende handschoenen en een aseptische techniek om besmetting van het bloed van de

patiënt te voorkomen bij het aansluiten van de bloedlijn op de dialysator, of bij het verzamelen van bloedmonsters of bij het terugvoeren van het bloed uit het buitenlichamelijke circuit. Het gebruik van een buitenlichamelijk circuit met verbindingen, conform aan ISO 8638 of ISO 8637-2, wordt aanbevolen voor deze dialysator.

De volgende procedure is hiervan een voorbeeld.

1. Voorbereiding voor de dialyse

- 1) Neem de dialysator uit de verpakking en plaats deze op de dialysatorhouder.
- 2) Hang een verpakking met steriele fysiologische zoutoplossing aan een IV-stang (1000 ml of meer) en verbind de arteriële infusielijn met de verpakking.
- 3) Vul de arteriële bloedlijn met fysiologische zoutoplossing, eerst de kant van de verbinding met de vasculaire toegang en vervolgens de kant van de verbinding met de dialysator. Klem beide uiteinden van de arteriële slang vast. (Fig. 1)
- 4) Sluit de veneuze slang aan op de veneuze poort van de dialysator. (Fig. 2)
- 5) Sluit de arteriële slang die is gevuld met fysiologische zoutoplossing voorzichtig aan op de arteriële poort en zorg ervoor dat er geen lucht in de dialysator komt. Als er luchtballen worden waargenomen in de arteriële poort, verwijder ze dan door in de veneuze druppelkamer te knijpen. (Fig. 3)
- 6) Spoel de bloedzijde van de dialysator en de bloedlijn met meer dan 1000 ml fysiologische zoutoplossing bij ongeveer 100 ml/min. (Fig. 4)
- 7) Sluit de dialysaatlijnen aan op de dialysaatpoorten zodat het dialysaat in tegenstroom met de bloedstroom stroomt. Verwijder eventuele luchtballen en spoel de dialysaatzijde met dialysaat dat stroomt met ongeveer 500 ml/min. (Fig. 5) Laat het dialysaat minstens 5 minuten stromen. Vermijd ultrafiltratie tijdens deze procedure.
- 8) Laad de dialysator en bloedlijnen met meer dan 500 ml gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing en controleer dat er geen luchtballen in de dialysator achterblijven door herhaaldelijk te spoelen. Vervang de dialysator als er massieve luchtballen uit de vezels komen. (Fig. 6)
- 9) Bevestig dat de veneuze bellenvol ongeveer 3/4 vol is.
- 10) Klem de veneuze slang bij het distale uiteinde.

2. Dialyse

- 1) Stroom dialysaat na het instellen van de filtratiesnelheid op 0 ml/uur als het dialysaat niet stroomt.
- 2) Verbind de arteriële slang met de arteriële canule van de patiënt.
- 3) Open de klemmen van zowel de arteriële als veneuze slangen en start de bloedpomp met 50-100 ml/min. Wanneer bloed het einde van de veneuze slang bereikt, stopt u de bloedpomp en verbindt u de veneuze slang met de veneuze canule.
- 4) Verhoog geleidelijk de bloedstroomsnelheid en de ultrafiltratiesnelheid tot de niveaus die nodig zijn voor elke patiënt.
- 5) Volg de instructies van de machinefabrikant voor wat betreft de bevestiging van de alarmfunctie van dialysemachines vóór de dialysebehandeling.

3. Voltooiing van de dialyse

- 1) Verlaag de druk zoveel mogelijk in zowel het bloed als de dialysaatzijde en stop de bloedpomp na 5 minuten perfusie zonder ultrafiltratie.
- 2) Sluit een container met 300 ml of meer fysiologische zoutoplossing aan op de infusielijn.
- 3) Laat met behulp van de zwaartekracht fysiologische zoutoplossing in de toegangszijde van het slagaderlijke bloedstromen om bloed in de slang terug te voeren. Klem het uiteinde van de slang vast en trek de arteriële canule aseptisch terug.
- 4) Verwijder de arteriële bloedlijn uit de bloedpomp.
- 5) Voer het bloed terug met behulp van de zwaartekracht en fysiologische zoutoplossing uit de dialysator en de bloedlijnen.
- 6) Klem het uiteinde van de slang vast en trek aseptisch de veneuze canule terug.
- 7) Gooi de dialysator, de slangen en andere wegwerpartikelen weg op een manier die door uw instelling is goedgekeurd.

IX. GARANTIE EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

- 1) "FILTRYZER" wordt vervaardigd in overeenstemming met de specificaties en in overeenstemming met de GMP-richtlijnen. Toray zal een dialysator met fabricagefouten gratis vervangen. Indien nodig zal Toray vragen de dialysator zelf en alle bijbehorende verpakking terug te sturen om de oorzaak te onderzoeken en indien nodig corrigerende maatregelen te nemen.
- 2) Toray is niet verantwoordelijk voor enige schade, ongeacht productschade, patiëntletsel of andere problemen veroorzaakt door een onjuiste hantering, een onjuist gebruik, een onjuiste bediening of opslag door de klant.
- 3) Toray is niet verantwoordelijk voor productschade, patiëntletsel of andere problemen die zijn veroorzaakt door het hergebruik van de dialysator.

X. OVERIGE GEGEVENS

De volgende informatie is op aanvraag beschikbaar.

- 1) informatie over de testmethoden
- 2) Kenmerken van de prestatie *in vivo*

A:Red side of the product label/Côté rouge de l'étiquette du produit/Lato rosso dell'etichetta del prodotto/Rote Seite des Produktetiketts/Lado rojo de la etiqueta del producto/Κόκκινη πλευρά της ετικέτας του προϊόντος/Rode zijde van het productetiket
 V:Blue side of the product label/Côté bleu de l'étiquette du produit/Lato blu dell'etichetta del prodotto/Blaue Seite des Produktetiketts/Lado azul de la etiqueta del producto/Μπλε πλευρά της ετικέτας του προϊόντος/Blauwe zijde van het productetiket

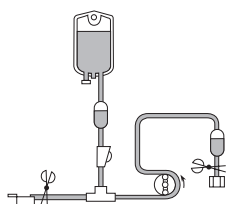


Fig.1/Abb.1/Εικ.1

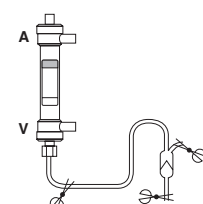


Fig.2/Abb.2/Εικ.2

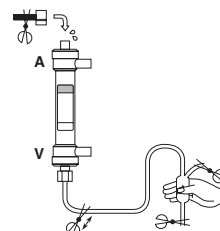


Fig.3/Abb.3/Εικ.3

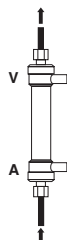


Fig.4/Abb.4/Εικ.4

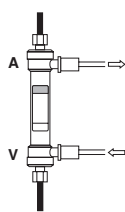


Fig.5/Abb.5/Εικ.5

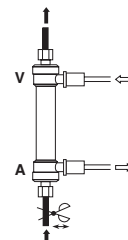
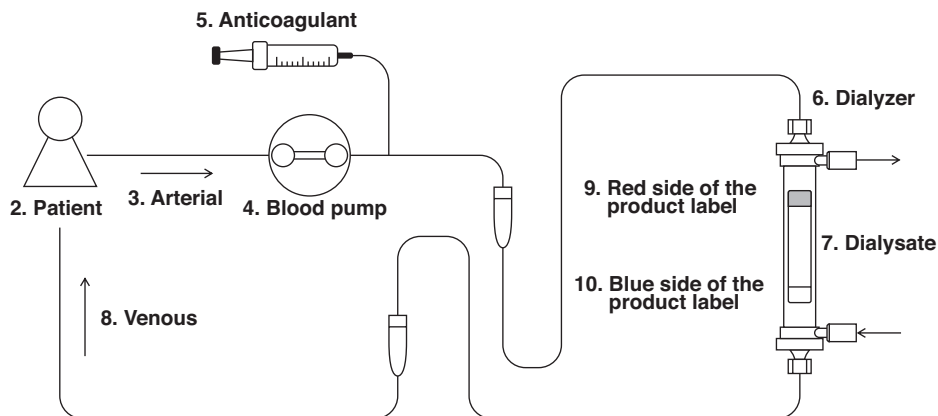











Fig.6/Abb.6/Εικ.6



1. Typical hemodialysis circuit

	English	Français	Italiano	Deutsch	Español	Ελληνικά	Nederlands
1.	Typical hemodialysis circuit	Circuit typique d'hémodialyse	Tipico circuito di emodialisi	Typischer Dialysekreislauf	Circuito de hemodiálisis típico	Τυπικό κύκλωμα αιμοκάθαρσης	Typisch hemodialysecircuit
2.	Patient	Patient	Paziente	Patient	Paciente	Ασθενής	Patiënt
3.	Arterial	Ligne artérielle	Arterioso	Arteriell	Arterial	Αρτηριακή	Slagaderlijk
4.	Blood pump	Pompe à sang	Pompa sangue	Blutpumpe	Bomba de sangre	Αντλία αίματος	Bloedpomp
5.	Anticoagulant	Anticoagulant	Anticoagulante	Antikoagulans	Anticoagulante	Αντιπηκτικό	Antistollingsmiddel
6.	Dialyzer	Dialyseur	Dializzatore	Dialysator	Dializador	Φίλτρο	Dialysator
7.	Dialysate	Dialysat	Dialisato	Dialysat	Dializado	Διάλυμα αιμοκάθαρσης	Dialysaat
8.	Venous	Ligne veineuse	Venoso	Venös	Venoso	Φλεβική	Veneus
9.	Red side of the product label	Côté rouge de l'étiquette du produit	Lato rosso dell'etichetta del prodotto	Rote Seite des Produktetiketts	Lado rojo de la etiqueta del producto	Κόκκινη πλευρά της ετικέτας του προϊόντος	Rode zijde van het productetiket
10.	Blue side of the product label	Côté bleu de l'étiquette du produit	Lato blu dell'etichetta del prodotto	Blaue Seite des Produktetiketts	Lado azul de la etiqueta del producto	Μπλε πλευρά της ετικέτας του προϊόντος	Blauwe zijde van het productetiket

	English	Français	Italiano	Deutsch	Español	Ελληνικά	Nederlands
	Refer to instructions for use.	Se référer aux instructions d'utilisation	Fare riferimento alle istruzioni d'uso.	Bitte Gebrauchsanweisung beachten.	Consulte las instrucciones de uso	Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης.	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Lot	Lot	Lotto	Chargen bezeichnung	Lote	Παρτίδα	Partij
	Date of manufacture	Date de fabrication	Data di produzione	Hersteldatum	Fecha de fabricación	Ημερομηνία παραγωγής	Fabricagedatum
	Expiry date	Date de péremption	Data di scadenza	Verwendbar bis	Fecha de caducidad	Ημερομηνία λήξεως	Vervaldatum
	Single sterile barrier system with protective packaging outside. Sterile fluid path sterilized using gamma irradiation.	Système de barrière stérile unique avec emballage extérieur de protection. Circuit destiné à contenir un fluide stérile, stérilisé par irradiation gamma.	Singolo sistema di barriera sterile con imballaggio protettivo esterno. Percorso del fluido sterile sterilizzato mediante irradiazione gamma.	Einfaches Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung. Sterile Leitungen sind gammasterilisiert.	Sistema de barrera estéril simple con embalaje protector en el exterior. La ruta de paso del fluido se ha esterilizado mediante radiación gamma.	Μονό σύστημα φραγμού αποστείρωσης με εξωτερική προστατευτική συσκευασία. Διαδρομή αποστειρωμένου υγρού που αποστειρώνεται με χρήση ακτινοβολίας γάμμα.	Enkel steriel gesloten systeem met beschermende buitenverpakking. Steriel vloeistofpad gesteriliseerd met gammastraling.
	For single use only	A usage unique	Usare solo una volta	Nur zum einmalgebrauch	Material no reutilizable	Μίας χρήσεως	Alleen voor eenmalig gebruik
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use.	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni d'uso.	Bei Schäden an der Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung befolgen.	No lo use si el embalaje está dañado y consulte las instrucciones de uso.	Μην το χρησιμοποιήσετε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη και συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης.	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en de gebruiksaanwijzing raadplegen.
	Non-pyrogenic fluid path (Blood side)	Circuit apyrogène (côté sang)	Percorso fluido non pirogeno (lato sangue)	Pyrogenfreier Fluss (Blutseite)	Vía de fluido no pirogénico (lado de la sangre)	Μη πυρετογόνα διαδρομή υγρού (Αιματικό διαμέρισμα)	Niet-pyrogeen circuit (bloedzijde)
	Medical device	Dispositif médical	Dispositivo medico	Medizinprodukt	Dispositivo médico	Ιατρική συσκευή	Medisch hulpmiddel

Technical Data/ Caractéristiques Techniques/ Dati Tecnici/ Technische Daten/ Datos Técnicos Τεχνικά Χαρακτηριστικά/ Technische gegevens

English/ Français/ Italiano/ Deutsch/ Español/ Ελληνικά/ Nederlands

Type/ Type/ Tipo/ Typ/ Tipo/ Τύπος/ Type	BG Series			
	BG-1.3U	BG-1.6U	BG-1.8U	BG-2.1U
Housing/ Boîtier/ Contenitore/ Gehäuse/ Carcasa/ Περιβλήμα/ Behuizing Material/ Matériau/ Materiale/ Material/ Material/ Υλικό/ Materiaal	Polystyrene			
Fibers/ Fibres/ Fibre/ Kapillaren/ Fibras/ Ίνες/ Vezels Material/ Matériau/ Materiale/ Material/ Material/ Υλικό/ Materiaal	Polymethylmethacrylate (PMMA)			
Inside diameter/ Diamètre intérieur/ Diametro interno/ Innendurchmesser/ Diámetro interno/ Εσωτερική διάμετρος/ Binnendiameter (μm)	200			
Membrane thickness/ Epaisseur de la membrane/ Spessore di membrana/ Wandstärke der Membran/ Espesor de la membrana/ Πάχος μεμβράνης/ Membraandikte (μm)	30			
Effective surface area/ Surface active/ Superficie effettiva/ Aktive Oberfläche/ Area de la superficie efectiva/ Ενεργός επιφάνεια/ Effectieve oppervlakte (m ²)	1.3	1.6	1.8	2.1
O-ring (secondary sealing material)/ Joint torique (pièce d'étanchéité secondaire)/ Anello di tenuta (materiale di sigillatura secondaria)/ Dichtring (Sekundäres Dichtmaterial)/ Junta tórica (material de sellado secundario)/ Δακτύλιος (δευτερογενές υλικό σφράγισης)/ O-ring (secundair afdichtingsmateriaal)	Silicone rubber			
Potting material/ Matériau d'empotage/ Materiale fissaggio/ Verguubmasse/ Material de envasado/ Υλικό Potting/ Bewaarmateriaal	Polyurethane			
Sterilization/ Stérilisation/ Sterilizzazione/ Sterilisation/ Esterilización/ Αποστείρωση/ Sterilisatie	Gamma-ray Irradiation/ Traitement par rayons gamma/ Irradiatione raggi gamma/ Gammastrahlen/ Radiaciones Gamma/ γ-ακτινοβολία/ Bestraling met gammastralen			
Blood volume/ Volume sanguin/ Volume di riempimento ematico/ Blutfüllvolumen/ Volumen de sangre/ Όγκος αίματος/ Bloedvolume [#] (mL)	77	95	113	124
Clearance <i>in vitro</i> / Clairance <i>in vitro</i> / Clearance <i>in vitro</i> / Clearance <i>in vitro</i> / Aclareamiento <i>in vitro</i> / Κάθαρση <i>in vitro</i> / Klaring <i>in vitro</i> ^{##} (mL/min)				
Urea/ Urée/ Urea/ Harnstoff/ Urea/ Ουρία/ Ureum	184	189	191	192
Creatinine/ Créatinine/ Creatinina/ Kreatinin/ Creatinina/ Κρεατινίνη/ Creatinine	182	188	188	191
Phosphate/ Phosphates/ Fosfati/ Phosphat/ Fosfatos/ Φωσφορικά/ Fosfaat	155	165	172	179
Vitamin B12/ Vitamine B12/ Vitamina B12/ Vitamin B12/ Vitamina B12/ Βιταμίνη Β12/ Vitamine B12	106	118	123	133
Inulin/ Inuline/ Inulina/ Inulin/ Inulina/ Ινουλίνη/ Inuline	60	67	72	81
UFR (Ultrafiltration coefficient) <i>in vitro</i> / UFR (Coefficient de Ultra filtration) <i>in vitro</i> / UFR (coefficiente di ultrafiltrazione) <i>in vitro</i> / UFR (Ultrafiltrationskoeffizient) <i>in vitro</i> / UFR (Coeficiente de ultrafiltración) <i>in vitro</i> / UFR (Συντελεστής Υπερδιήθησης) <i>in vitro</i> / UFR (Ultrafiltratiecoëfficiënt) <i>in vitro</i> ^{###} (mL/hr/mmHg)	29	33	35	43
Pressure drop/ Chute de pression/ Caduta di pressione/ Druckabfall/ Caída de presión/ Πτώση της πίεσης/ Chute de p/ Drukval ^{###} Blood compartment/ Compartiment sanguin/ Comparto sangue/ Blutkompartiment/ Compartimiento de la sangre/ Διαμέρισμα αίματος/ Bloedcompartiment (kPa(mmHg), at Q _B =200mL/min)	6.9 (52)	5.8 (44)	5.1 (38)	4.5 (34)
Max. TMP/ PTM max./ Massaima PTM/ Max. TMP/ PTM max./ Μέγιστη TMP/ Max. TMP (kPa (mmHg))	66 (500)			
Range of blood flow rates/ Valeurs de débit sanguin/ Flusso ematico minimo-massimo/ Bereich der Blutflußraten/ Rango de flujo de sangre/ Περιοχή ρυθμών ροής αίματος/ Bereik van bloedpercentages (mL/min)	100-400			
Max. dialysate flow/ Débit dialysat maximum/ Massimo flusso dialisato/ Max. Dialysatfluß/ Flujo máximo de dializado/ Μέγιστες τιμές ροής υγρού αιμοκάθαρσης/ Maximale dialysaatstroom (mL/min)	1,000			

Blood volumes are typical measured data.
Clearances are typical measured data with aqueous solution.
Q_B: 200±4 mL/min, Q_D: 500±10 mL/min, Q_F: 10±2 mL/min, Temp.: 37±1°C
UFRs are typical measured data with bovine blood (Ht 30±3%, TP 6±0.5 g/dL).
Q_B: 200±4 mL/min, TMP: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg), Temp.: 37±1°C
Pressure drops are typical data with glycerin solution of similar viscosity to bovine blood (Ht: 32±3%, TP: 60±5g/L).

Les valeurs indiquées sont des valeurs représentatives.
Les clairances sont mesurées en solution aqueuse.
Q_B: 200±4 ml/min, Q_D: 500±10 ml/min, Q_F: 10±2 ml/min, T: 37±1°C
Coefficients UF mesurés avec du sérum bovin (Ht 30±3%, protéines totales 6±0.5 g/dl). Q_S: 200±4 ml/min, PTM: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg), T: 37±1°C
Les chutes de pression sont les données typiques d'une solution de glycérine dont la viscosité est similaire à celle du sang de bœuf (Ht: 32±3%, protéines totales 60±5g/l)

Il volume ematico è un dato tipico misurato.
Le clearances sono calcolate con soluzione acquosa.
Q_B: 200±4 mL/min, Q_D: 500±10 mL/min, Q_F: 10±2 mL/min, Temp.: 37±1°C
UFR con sangue bovino (Ht 30±3%, TP 6±0.5 g/dL). :
Q_B: 200±4 mL/min, TMP: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg), Temp.: 37±1°C
Le cadute di pressione sono dati tipici con soluzione di glicerina di viscosità simile al sangue bovino (Ht: 32±3%, TP: 60±5 g/L)

Los valores de volumen de sangre corresponden a una medición estandarizada.
Los aclaramientos son medidos en condiciones estándar con solución acuosa.
Q_B: 200±4 mL/min, Q_D: 500±10 mL/min, Q_F: 10±2 mL/min, Temp.: 37±1°C
Los valores de UFR son medidos en condiciones estándar con sangre bovina (Ht 30±3%, TP 6±0.5 g/dL). Q_B: 200±4 mL/min, TMP: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg), Temp.: 37±1°C
Las caídas de presión son datos típicos con solución de glicerina de viscosidad similar a la de la sangre bovina (Ht: 32±3%, TP: 60±5g/L)

Ο όγκος αίματος είναι μετρήσιμο στοιχείο.
Καθάρσεις είναι στοιχεία που μετρώνται με υδατικό διάλυμα.
Q_B: 200±4 mL/min, Q_D: 500±10 mL/min, Q_F: 10±2 mL/min, Θερμοκρασία: 37±1°C
Οι τιμές UFR είναι τυπικές μετρήσεις με βόειο αίμα. (Ht 32±2%, TP 6±0.5 g/dL).
Q_B: 200±4 mL/min, TMP: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg). Θερμοκρασία: 37±1°C
Οι πτώσεις πίεσης είναι τυπικά στοιχεία με διάλυμα γλυκερίνης παρόμοιας εσωτερικής τριβής με το αίμα βοοειδούς (Ht: 32±3%, TP: 60±5g/L)

Bloedvolumes zijn typische gemeten gegevens.
Klaringen zijn typische gemeten gegevens bij een waterige oplossing.
Q_B: 200±4 mL/min, Q_D: 500±10 mL/min, Q_F: 10±2 mL/min, Temp.: 37±1°C
UFRs zijn typische meetgegevens met runderbloed (Ht 30±3%, TP 6±0.5 g/dL).
Q_B: 200±4 mL/min, TMP: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg), Temp.: 37±1°C
Drukvalingen zijn typische gegevens met glycerineoplossing met vergelijkbare viscositeit als runderbloed (Ht: 32±3%, TP: 60±5 g/L).

Blutfüllvolumen aus standardisierter Messung.
Clearancedaten bei wässriger Lösung.
Q_B: 200±4 mL/min, Q_D: 500±10 mL/min, Q_F: 10±2 mL/min, Temp.: 37±1°C
UFR-ermittelte Daten mit Rinderblut (Ht 30±3%, TP 6±0.5 g/dL).
Q_B: 200±4 mL/min, TMP: 13.3±1.3 kPa (100±10 mmHg), Temp.: 37±1°C
Druckverluste sind typische Daten mit einer Glycerinlösung von ähnlicher Viskosität wie Rinderblut: (Ht: 32±3 %, TP: 60±5 g/L)

'TORAY'



EC REP

Toray International Italy S.r.l.

Via Mecenate 86, 20138 Milan, ITALY

Exporter:

Toray Medical Co., Ltd.

4-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, JAPAN

Manufacturer:

Toray Industries, Inc.

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8666, JAPAN